


## GIO perfect Care

Dispositivo per la cura del viso Sonic LED  
con terapia EMS

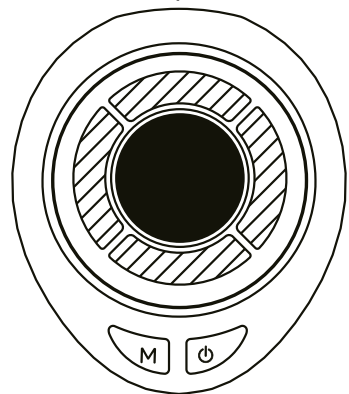

## MANUALE D'USO

Per evitare danni causati da un uso improprio, leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto seguendo rigorosamente le indicazioni del manuale.

## INDICE

Informazioni sul prodotto	1
Struttura del prodotto	2
Precauzioni di sicurezza	3
Istruzioni per l'uso	4
Come applicare un dischetto di cotone	4
Come utilizzare	5
Istruzioni per la ricarica	5
Dichiarazione di non responsabilità	5

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

## 1. Principio di bellezza basato sulle vibrazioni sonore

Questo prodotto utilizza tecnologie di micro-vibrazione e terapia con onde luminose, combinate con un design intelligente che si adatta ai contorni del viso per pulire la pelle in profondità senza tralasciare alcuna zona. Emette circa 8000 vibrazioni ad alta frequenza al minuto per rimuovere il sebo e le impurità dai pori, lasciando la pelle pulita, levigata, liscia ed elastica, raggiungendo un nuovo livello di efficacia nella pulizia della pelle.

## 2. Principio di bellezza termica

Il calore delicato aiuta a stimolare la circolazione sanguigna negli strati più profondi della pelle, accelerandone il metabolismo. Questa funzione riduce efficacemente le occhiaie e le rughe intorno agli occhi, migliorando la trasparenza e la luminosità della pelle, anche senza trucco. In combinazione con le microvibrazioni, l'effetto riscaldante aiuta a migliorare la compattezza della pelle e ad alleviare la fatica.

## A. Effetto micro-vibrazioni

Migliora la compattezza e l'elasticità della pelle. Aiuta a prevenire allergie e altri problemi cutanei. Restringe i pori, trattiene l'idratazione e riduce le rughe. Allevia la tensione muscolare, l'affaticamento cutaneo, gli arrossamenti e il gonfiore. Aiuta a prevenire la ricomparsa dell'acne.

## B. Effetto riscaldante

Lenisce la pelle e i muscoli, allevia il dolore e l'indolenzimento. Stimola la circolazione sanguigna, apre i pori e migliora l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle. Migliora l'elasticità della pelle e la ritenzione dell'idratazione. Funziona con un dischetto di cotone in dotazione per una pulizia profonda, aiutando a rimuovere più efficacemente il sebo e lo sporco dal viso.

## 3. Principio della terapia con onde luminose

## Luce rossa:

Aumenta l'attività cellulare e il metabolismo, stimola la produzione di collagene, migliora la circolazione e aumenta l'elasticità della pelle. Riduce l'opacità e i sottotoni gialli, offrendo benefici anti-età e riparatori.

## Luce blu:

Riduce efficacemente l'infiammazione durante la formazione dell'acne. Inibisce i batteri che causano l'acne senza danneggiare il tessuto cutaneo circostante e accorcia la fase infiammatoria.

## Luce gialla:

Penetra negli strati più profondi della pelle, viene assorbita dai globuli rossi e favorisce una risposta fotochimica. Questa luce aiuta a ridurre la pigmentazione, favorisce il drenaggio linfatico e migliora la ruvidità, il rossore e l'immunità generale della pelle.

## Luce viola:

Offre effetti antibatterici e antinfiammatori, stimola la produzione di collagene, migliora l'elasticità e la luminosità e aiuta a ridurre i segni dell'invecchiamento e l'irritazione cutanea.


## 4. Effetto della terapia con giada

Si ritiene che la giada abbia proprietà naturali disinfettanti, disintossicanti e calmanti. Favorisce la circolazione sanguigna, rallenta l'invecchiamento, migliora la qualità del sonno e potenzia il metabolismo e le difese immunitarie. La giada può aiutare a inibire un'ampia gamma di batteri e virus, senza effetti collaterali o danni per il corpo umano.

## 5. Tecnologia a microcorrente EMS

Questo dispositivo utilizza microcorrenti EMS (stimolazione muscolare elettrica) per attivare le cellule della pelle, stimolando la produzione di collagene e la contrazione muscolare. Durante l'uso è possibile avvertire una leggera sensazione di formicolio e una sensazione di compattezza. L'EMS aiuta a ridurre le rughe e le linee sottili, ripristinando la levigatezza, la compattezza e la luminosità giovanile della pelle, in modo sicuro e indolore.

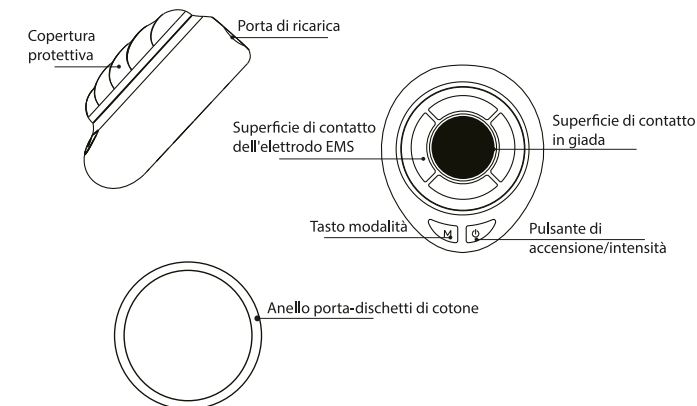


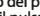



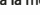
## STRUTTURA DEL PRODOTTO




## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non raccomandato per l'uso da parte di:
  - Persone con dispositivi medici elettronici impiantati, come pacemaker.
  - Persone con apparecchiature mediche elettroniche di supporto vitale (ad esempio macchine cuore-polmone artificiali) o altri dispositivi impiantati come monitor cardiaci.
  - Persone affette da malattie acute o infettive, come la tubercolosi.
  - Persone con pressione alta o disturbi del sangue.
  - Persone affette da malattie della pelle, dermatite atopica, allergie o altre patologie cutanee.
  - Persone con alterazioni patologiche del colore della pelle causate da irritazioni fisiche.
  - Persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o che non hanno esperienza nell'uso di tali dispositivi.
  - Persone con ridotta sensibilità al calore o al dolore.
- Non utilizzare il dispositivo sulle seguenti aree:
  - Aree con impianti facciali o metallo sottocutaneo.
  - Pelle infiammata, arrossata, gonfia o irritata.
  - Nevi in rilievo o irregolari, palpebre, bulbi oculari o area immediatamente circostante gli occhi.
- Se avvertite dolore o qualsiasi sensazione anomala sulla pelle o sul corpo, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo.
- Pulire regolarmente il dispositivo dopo l'uso per evitare l'accumulo di polvere o umidità, che potrebbero ridurre la durata.
- Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo se si rileva un calore anomalo per evitare qualsiasi rischio di lesioni.
- Quando non è in uso, conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Non conservare o utilizzare il prodotto in bagni o altri ambienti umidi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non consentire ai bambini di utilizzare o mettere in bocca la punta metallica, poiché ciò potrebbe causare incidenti.
- Non far cadere o urtare il dispositivo. Se viene danneggiato a causa di un urto, non utilizzarlo più.
- Non immergere il dispositivo in acqua né sciacquarlo sotto l'acqua corrente per un periodo prolungato.
- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da soli.
- Evitare di utilizzare il dispositivo su aree affette da acne, brufoli, arrossamenti o infiammazioni.
- Per le pelli sensibili, si sconsiglia di utilizzare il dispositivo quotidianamente: limitare l'uso a una volta alla settimana.
- Non collegare il cavo di ricarica con le mani bagnate. Ricaricare sempre in un ambiente asciutto e assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di ricaricarlo.
- Se il dispositivo non verrà utilizzato per più di sette giorni, scollegarlo dal cavo di ricarica e riporlo con l'alimentazione spenta.
- Non attendere che la batteria si scarichi completamente prima di ricaricarla. Si consiglia di ricaricare il dispositivo secondo necessità prima di ogni utilizzo.

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Tenere premuto [  ] per 2 secondi per accendere il dispositivo; si sentiranno due segnali acustici. Tenere premuto nuovamente [  ] per 2 secondi per spegnerlo; questa volta si sentirà un segnale acustico prolungato.
- L'intensità della vibrazione è impostata su bassa per impostazione predefinita. Toccare il pulsante [  ] per regolare il livello nel seguente ordine: basso - medio - alto. Ogni tocco del pulsante [  ] è accompagnato da un breve segnale acustico. Toccare due volte il pulsante [  ] per attivare o disattivare la vibrazione.
- Nella modalità Sbiancamento e Ringiovanimento, che si attiva automaticamente all'accensione, sono abilitate le funzioni luce rossa, vibrazione a induzione e riscaldamento.
- Per attivare la modalità Lifting, toccare l' [  ] in questo modo si attiveranno le funzioni luce blu, microcorrente e vibrazione a induzione.
- Per la modalità Idratazione e Riparazione, toccare nuovamente il pulsante [  ] per passare alla modalità luce gialla, che attiva le funzioni di vibrazione a induzione e riscaldamento.
- Per accedere alla modalità lenitiva e calmante, toccare nuovamente il pulsante [  ] in questo modo si attiveranno la luce viola, la vibrazione a induzione, la microcorrente e le funzioni di riscaldamento.
- La luce di funzionamento predefinita lampeggerà per indicare che la batteria è scarica. Durante la vibrazione sonora, la luce blu lampeggerà. Il dispositivo emetterà sei segnali acustici prima di spegnersi automaticamente.
- Un timer intelligente di 8 minuti spegne automaticamente il dispositivo dopo una sessione.

## COME APPLICARE UN DISCHETTO DI COTONE

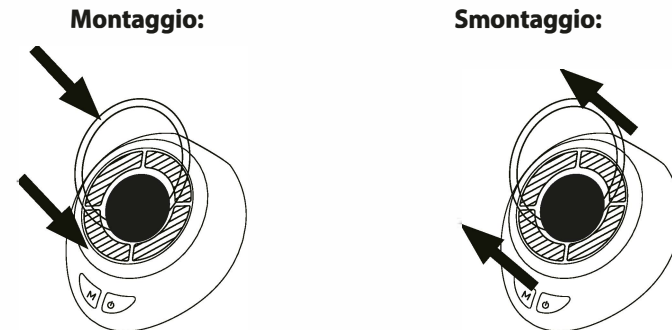

## COME UTILIZZARE

- Detergere il viso, rimuovere il trucco e asciugare accuratamente la pelle prima dell'uso. Rimuovere tutti i gioielli in metallo dal viso, dal collo e dalle mani.
- A seconda delle esigenze della pelle, applicare un sottile strato di gel conduttivo o una quantità moderata del prodotto per la cura della pelle preferito. Selezionare la modalità e il livello di intensità appropriati.
- Prima del primo utilizzo, testare il dispositivo sul dorso della mano o dietro l'orecchio. Se entro 24 ore non si verificano reazioni cutanee (ad es. arrossamento, bruciore, irritazione), il dispositivo può essere utilizzato in tutta sicurezza. Se si verifica una reazione anomala, interrompere il test e non utilizzare il prodotto.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Quindi, premere brevemente il pulsante per passare da una modalità all'altra e premere brevemente il pulsante di intensità per regolare il livello. Una volta selezionata la modalità e l'intensità desiderate e accesa la spia luminosa, il dispositivo è pronto per l'uso.
- Appoggiare delicatamente la testina di trattamento sulla pelle e iniziare il massaggio. Muovere il dispositivo lentamente con movimenti verso l'alto, coprendo uniformemente tutto il viso.
- Dopo l'uso, tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando non si sente un segnale acustico prolungato, che indica che il dispositivo è spento. Pulire la testina di trattamento con un panno morbido e leggermente umido. Assicurarsi di pulire bene i bordi e le fessure per evitare accumuli che potrebbero comprometterne il funzionamento futuro. Dopo la pulizia, riporre il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.
- Risciacquare il viso con acqua e applicare i normali prodotti per la cura della pelle.

### Nota


















- Spegnerne sempre il dispositivo e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
- Utilizzare salviette non alcoliche o un panno morbido per pulire la testina di trattamento e la superficie del dispositivo.
- Non utilizzare lana d'acciaio o detergenti aggressivi.
- Mantenere il dispositivo asciutto. Non immergerlo in acqua né esporlo all'umidità per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni.


## ISTRUZIONI DI RICARICA

- Posizionare il dispositivo in un luogo asciutto e ben ventilato. Collegare correttamente il cavo di ricarica sia all'unità principale che alla presa di corrente.
- Quando la spia blu lampeggia, il dispositivo è in carica.
- Quando tutte le spie blu rimangono accese fisse e si sentono tre bip, significa che la batteria è completamente carica. Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione prima di accenderlo e utilizzarlo.
- Non accendere il dispositivo mentre è in carica.

## DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Non si accetta alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti da un uso improprio.

-  Scan the QR code to download the manual
-  Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
-  Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
-  Scannez le code QR pour télécharger le manuel
-  Escanee el código QR para descargar el manual
-  Digitalize o código QR para descarregar o manual
-  Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
-  Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
-  Сканируйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
-  Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
-  Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
-  Scanează codul QR pentru a descărca manualul
-  Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
-  Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
-  Lae juhend alla, skannides QR-koodi
-  A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
-  ليلدلى ليوزنتل قعي رسالا قباچت ساللا زمر حسم

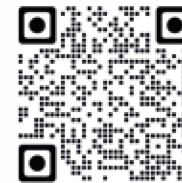

innoGIO

Prodotto in Cina per **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.  
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia  
**www.innogio.it**

 @innoGIO.official  @innogio\_com