

IT

GIO-780

innoGIO

# GIO perfect Mask

Maschera facciale a LED



## MANUALE D'USO

Per evitare danni causati da un uso improprio, leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto seguendo rigorosamente le indicazioni riportate nel manuale.


## PER INIZIARE



**Nota:** quando viene visualizzato il simbolo del controller, la funzione è attiva

### FUNZIONI DEI PULSANTI

- Pulsante di accensione/modalità: accensione/spegnimento e commutazione tra le modalità di illuminazione
- Pulsante Tempo: seleziona la durata del trattamento (10, 15 o 20 minuti)
- Pulsante Gear: regola l'intensità (1-3 livelli)
- Pulsante NIR: attivazione/disattivazione delle luci a infrarossi vicini

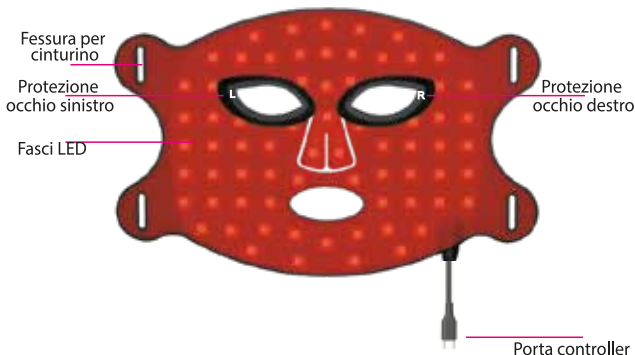

## ATTENZIONE

1. Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.
2. Pulire sempre il dispositivo prima dell'uso con l'alimentazione spenta. Utilizzare solo prodotti di pulizia raccomandati (pulire con un panno umido o una salvietta umidificata, oppure utilizzare una soluzione salina (NaCl allo 0,9%) per pulire le parti che vengono a contatto con la pelle).
3. Conservare la maschera facciale per terapia LED in posizione orizzontale, in un luogo asciutto, a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta.
4. Dopo il trattamento può verificarsi un arrossamento temporaneo, che di solito scompare entro 1-2 ore.
5. Dopo 12 trattamenti, gli utenti segnalano in genere un miglioramento visibile del tono e della consistenza della pelle.
6. Caricare completamente il dispositivo con il cavo USB in dotazione prima del primo utilizzo. La spia del controller lampeggia durante la ricarica.

## USO PREVISTO

- **Luce rossa** (660 nm): anti-invecchiamento, stimola il collagene, favorisce il rilassamento, migliora l'elasticità.
- **Luce blu** (410 nm): elimina i batteri che causano l'acne, riduce l'infiammazione e le cicatrici, aumenta l'ossigenazione, illumina il tono della pelle.
- **Luce gialla** (590 nm): equilibra la texture della pelle, stimola i globuli rossi, riduce arrossamenti/gonfiori/rughe sottili, attenua i segni dell'acne, stabilizza le condizioni della pelle.
- **Luce NIR** (850 nm): ripara la pelle, accelera il metabolismo, migliora la circolazione sanguigna, aumenta l'idratazione.

## CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO

1. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare 3-5 volte alla settimana per almeno 4 settimane.
2. I trattamenti di mantenimento possono essere continuati secondo necessità, a seconda delle condizioni della pelle e dello stile di vita.


## TEST DI SENSIBILITÀ

Prima del primo trattamento, eseguire un test di sensibilità cutanea:

1. Posizionare la maschera facciale per terapia LED sulla parte interna del braccio.
2. Premere il tasto di accensione per avviare un trattamento completo di 10 minuti.
3. Se la pelle risulta calda o fastidiosa, interrompere immediatamente il trattamento e rimuovere il dispositivo.
4. Attendere almeno 6 ore. Se si verificano arrossamenti o prurito, il dispositivo potrebbe non essere adatto a te.


## COME UTILIZZARE

### FASE 1

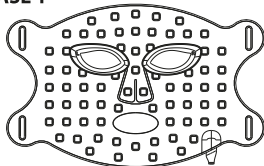

Rimuovere la pellicola protettiva

### FASE 2

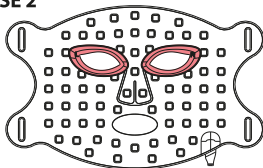


Installare le protezioni per gli occhi sinistro e destro

### FASE 3



Installare le cinghie sinistra e destra

### FASE 4

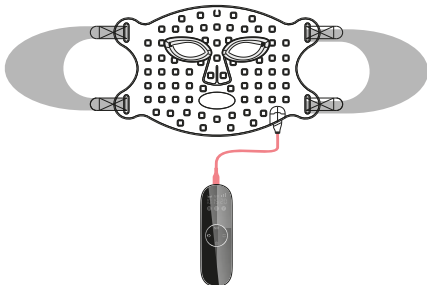

Controller plug-in di tipo C

## ISTRUZIONI PER L'USO

### **Stabilire la tolleranza cutanea**

- Iniziare con l'intensità Gear 1-2.
- Aumentare gradualmente man mano che la pelle si adatta.

### **Regolare la durata**

- Scegliere 10, 15 o 20 minuti con il pulsante Tempo.
- Non aumentare eccessivamente la durata o la frequenza.

### **Uso consigliato**

- 3-5 volte alla settimana, 10-20 minuti per sessione.
- Per la terapia con luce blu, non superare i 10 minuti.

### **Come eseguire un trattamento**

- Detergere ed esfoliare la pelle.
- Posizionare la maschera, fissare le cinghie e premere il pulsante di accensione.
- Si avvia in modalità luce rossa. Cambiare modalità con il pulsante di accensione, regolare l'intensità con il pulsante a forma di ingranaggio e impostare il tempo con il pulsante del tempo.
- La maschera si spegne automaticamente.
- Dopo l'uso, rimuovere la maschera, applicare un prodotto per la cura della pelle e utilizzare una protezione solare.
- Pulire con un panno umido o una salvietta a base d'acqua. Non pulire durante la ricarica.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Maschera LED ×1

Controller ×1

Cinghie elastiche ×2

Manuale d'uso ×1

Cavo di ricarica ×1

Custodia ×1

Protezioni per gli occhi ×2

## PRECAUZIONI

- Utilizzare solo nelle condizioni specificate nel presente manuale.
- Non utilizzare dopo lesioni recenti, interventi chirurgici o procedure cosmetiche (ad es. filler, Botox, microaghi, laser, peeling chimico) fino alla completa guarigione.
- Consultare un medico prima dell'uso in caso di gravidanza, cancro o sospetto cancro.
- Non trattare la pelle arrossata o gonfia causata da trattamenti precedenti.
- Interrompere l'uso se il rossore o il gonfiore persistono per più di 2 ore.
- Non utilizzare in caso di pelle estremamente sensibile, ferite aperte, infezioni o herpes.
- Non utilizzare su aree doloranti, gonfie, con croste o sanguinanti.
- Non applicare il retinolo prima della terapia con luce rossa (utilizzarlo solo dopo).
- Alcuni utenti potrebbero avvertire arrossamenti, secchezza o irritazioni temporanei, specialmente con la luce blu.
- Proteggi la pelle con una crema solare dopo il trattamento, poiché la sensibilità alla luce solare potrebbe aumentare.
- Non abusare della terapia con luce blu; un uso eccessivo può causare pigmentazione.
- Non guardare direttamente i LED. Utilizzare le protezioni per gli occhi in dotazione.
- Per adulti di età superiore ai 18 anni; non raccomandato per bambini di età inferiore ai 12 anni.
- Non modificare il dispositivo.

## AVVERTENZE

### **Prima dell'uso:**

- Effettuare sempre un test di sensibilità prima del primo trattamento.
- Utilizzare solo come specificato; usi non testati potrebbero comportare rischi sconosciuti.

### **Sicurezza del dispositivo:**

- Interrompere immediatamente l'uso se la pelle presenta una sensazione di calore fastidioso.
- Rimuovere creme, sieri, lozioni e trucco prima del trattamento.
- Tenere lontano da acqua, fonti di calore e aree infiammabili.
- Non modificare o smontare il dispositivo.
- Non utilizzare se il dispositivo, la batteria o il caricabatterie sono danneggiati.

### **Sicurezza durante la ricarica:**

- Caricare in ambienti interni, in un'area asciutta e ventilata, con un caricatore USB-C.
- Non ricaricare vicino a fonti d'acqua o in ambienti esplosivi.
- Non sovraccaricare; scollegare dopo la ricarica completa (circa 1 ora).
- Utilizzare solo gli accessori in dotazione.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Caricare a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F).

### **Sicurezza della batteria:**

- Non schiacciare, far cadere o esporre la batteria a danni.
- Evitare di cortocircuitare la batteria.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente e consultare un medico.

### **Smaltimento**

- Non smaltire il dispositivo nei rifiuti domestici.
- Il controller contiene una batteria agli ioni di litio. Al termine del ciclo di vita, restituire l'unità al produttore o seguire le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei dispositivi elettronici.

## **SPECIFICHE**

Nome del prodotto: GLOperfect Mask

ID prodotto: GIO-780

Colori LED: rosso, blu, giallo, infrarosso

Numero di LED: 70 pezzi (280 fasci di luce)

Batteria: 2000 mAh

Tensione: 3,7 V

Potenza: max. 6,5 W

Dimensioni del controller: 130× 40× 26,5 mm

Dimensioni maschera: 299× 210× 3,5 mm

Opzioni timer: 10 / 15 / 20 minuti

Materiale: ABS + silicone





# innoGIO


















Prodotto in Cina per **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.  
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia  
**[www.innogio.it](http://www.innogio.it)**



**@innoGIO.official**



**@innogio\_com**

-  Scan the QR code to download the manual
-  Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
-  Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
-  Scannez le code QR pour télécharger le manuel
-  Escanee el código QR para descargar el manual
-  Digitalize o código QR para descarregar o manual
-  Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
-  Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
-  Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
-  Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
-  Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
-  Scanează codul QR pentru a descărca manualul
-  Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
-  Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
-  Lae juhend alla, skannides QR-koodi
-  A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
-  لي لڊل لى زنتل ءى رسلا ءباچت سالا زم ر ح س ا

