


innoGIO

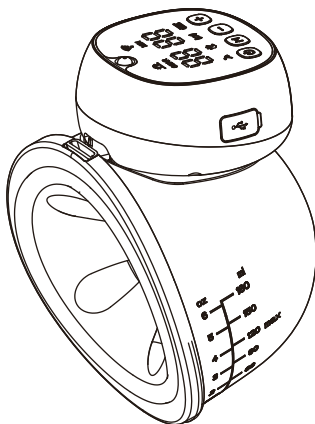

Glò mum Line Comfort

Tiralatte elettrico
indossabile

MANUALE UTENTE

Congratulazioni per essere diventata mamma! Se è la prima volta che si utilizza un tiralatte, potrebbe essere necessario un po' di tempo prima di abituarsi al suo funzionamento.

È importante che restiate rilassate durante il processo, anche se all'inizio non riuscite ad estrarre tutto il latte che vorreste. Il vostro corpo si adatterà di conseguenza e dopo diversi tentativi sarete in grado di ottimizzare l'estrazione.

Leggere prima dell'uso


- Limitare l'utilizzo a un massimo di 15 minuti alla volta. È perfettamente normale che all'inizio non venga estratto molto latte in questo lasso di tempo. Se lo si usa regolarmente, il corpo si adatterà a produrre sempre più latte.
- Le ricerche hanno dimostrato che per ottenere una produzione ottimale di latte materno è necessario essere completamente rilassate. Questo aiuta a rilasciare l'ossitocina, un ormone che stimola il riflesso di espulsione del latte. Quindi, sedetevi sul vostro divano preferito ascoltando la vostra musica preferita, provate a fare degli esercizi di respirazione o fatevi fare un massaggio dal vostro partner!
- Il dispositivo è dotato di una funzione di massaggio che può essere utilizzata (da 1 a 3 minuti) prima dell'estrazione. In questo modo il corpo rilascia ossitocina e aumenta la produzione di latte.
- Pulire regolarmente il dispositivo. Pulire le parti del microinfusore che sono state a contatto con il latte materno e lavarsi le mani prima e dopo ogni utilizzo.
- Scegliere il livello di aspirazione ottimale. Aumentare gradualmente l'aspirazione del tiralatte fino a quando diventa leggermente fastidiosa, quindi abbassarla di una tacca. Al riavvio, il tiralatte inizierà a funzionare al livello di aspirazione utilizzato più di recente.
- Poiché si tratta di un tiralatte indossabile, assicurarsi di utilizzare un reggiseno da allattamento adeguato.

Descrizione del prodotto

Cavo USB Tipo -C - 1 pezzi



Fibbia di regolazione
del reggiseno - 1 pz.

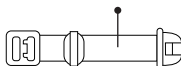

Motore del tiralatte
- 1 pezzi




Flangia massaggio in silicone 24 mm - 1 pz.


Diaframma in silicone - 1 pezzi



Anello di tenuta
- 1 pezzi

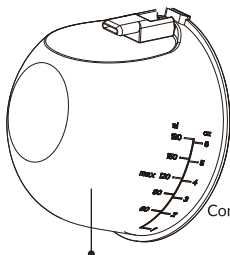

Coppa Raccoglilatte - 1 pz.

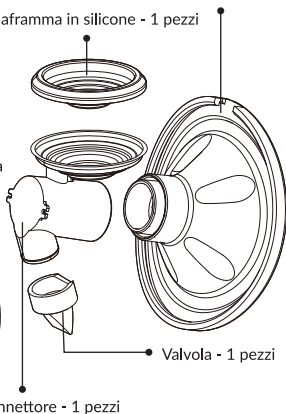

Valvola - 1 pezzi


Connettore - 1 pezzi

Accessori:

Telecomando - 1 pz.

Borsa per riporre - 1 pz.

Pannello di controllo

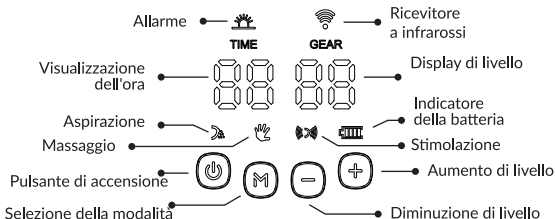

Utilizzare la funzione di massaggio prima dell'estrazione profonda.

3 modalità

Funzione di massaggio: 12 livelli

(Massaggiare prima per stimolare la produzione di latte)

Funzione di aspirazione: 12 livelli

(Scegliere il livello ottimale; la modalità di estrazione è progettata per un'aspirazione sia lenta che profonda)

Stimolazione: 6 livelli

(L'uso simultaneo di massaggio ed estrazione è eccellente per i capezzoli introflessi o per le mamme alle prime armi; in questo caso, utilizzare la modalità 3 + 1, 3 massaggi a frequenza breve e 1 aspirazione profonda).

Accensione/spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione "⏻" per 3 secondi.

Pausa e ripresa: Premere il pulsante di accensione "⏻".

Cambio di modalità: Premere il tasto di modalità "M".

Modifica del livello: Premere "+" o "-" per aumentare o diminuire il livello.

Indicatore di batteria e di carica

Bianco lampeggiante: Batteria scarica (è necessario caricarla)

Bianco continuo: La batteria è completamente carica (lampeggia in bianco durante la carica)

Allarme latte: L'allarme lampeggia in rosso ogni 10 minuti. Quando è il momento di estrarre la coppa raccogli-latte, il microinfusore si spegne automaticamente dopo 30 minuti di utilizzo continuo.

Istruzioni per la pulizia


Prima dell'uso

1. Rimuovere il motore del tiralatte.
2. Mettere tutte le parti in silicone in acqua bollente per 3-5 minuti.
3. Lavare la coppa raccogli latte e il linker con acqua calda e sapone e risciacquare bene.
4. Prima dell'uso, pulire le parti con un panno o farle asciugare all'aria.

Dopo l'uso


1. Sciacquare la coppa raccogli latte, la valvola e il connettore subito dopo l'uso.
2. Mettere tutte le parti in silicone in acqua bollente per 3-5 minuti.
3. Pulire le parti con un panno o asciugarle all'aria prima di riporle.
4. Non immergere la parte elettrica del dispositivo in acqua.

Montaggio del dispositivo

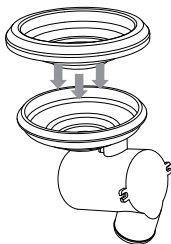


FASE 1

Inserire la diaframma di silicone nel connettore e premere con le mani per assicurarsi che i bordi si fissino saldamente per garantire una tenuta perfetta.

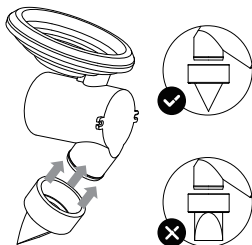

FASE 2

Installare la valvola nella parte inferiore del connettore, assicurandosi che sia installata nella direzione corretta.

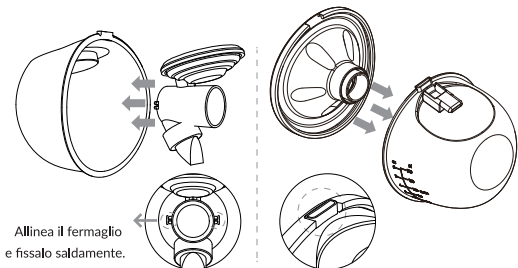


FASE 3

Inserire il raccordo assemblato nella coppa raccogli latte.

FASE 4

Inserire la flangia in silicone per il massaggio nella coppa raccogli latte del latte e assicurarsi che sia sigillato correttamente per evitare perdite.

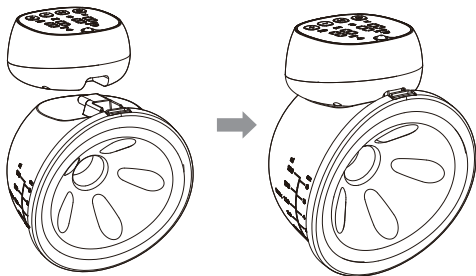


FASE 5

Installare il tiralatte principale.


Istruzioni per l'uso

Collocare il microinfusore nel reggiseno

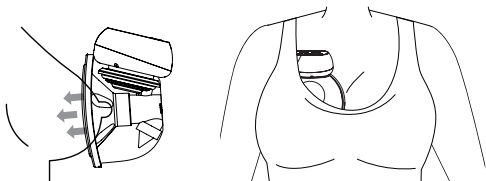

Premere con forza il petalo massaggiante in silicone contro il seno, senza lasciare spazi vuoti e assicurandosi che i capezzoli siano centrati. Mantenere il dispositivo in posizione verticale. Fate attenzione a non distorcere la posizione del prodotto e del vostro petto, altrimenti il tiralatte non avrà l'aspirazione necessaria.


Spegnere il tiralatte e rimuoverla con cautela

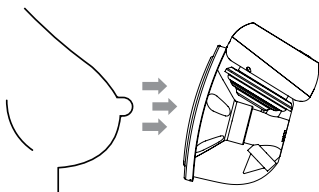

Nota: non sdraiarsi durante l'uso del tiralatte. Se si avverte un disagio durante la spremitura o si notano vesciche sul capezzolo o sul seno, provare a ridurre il livello di aspirazione del tiralatte.

Posizione seduta per l'aspirazione

Rilassate il corpo, sedetevi su una sedia comoda e piegatevi leggermente in avanti (usate un cuscino per sostenere la schiena). Assicuratevi di tenere il tiralatte e la coppa raccoglilatte del latte in posizione verticale.

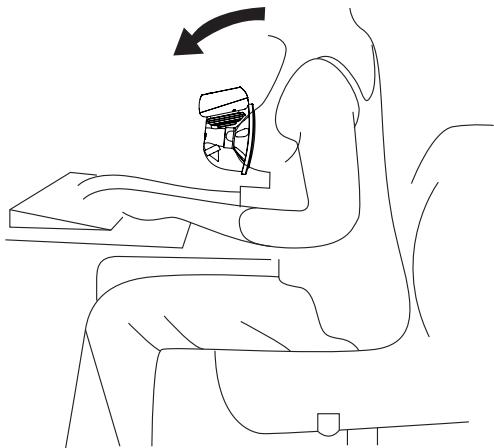

Versare il latte

Tenere il tiralatte in posizione verticale e rimuovere con cautela il motore dal corpo del tiralatte. Quando si versa il latte nel biberon, prestare attenzione alla fessura di raccolta del latte.

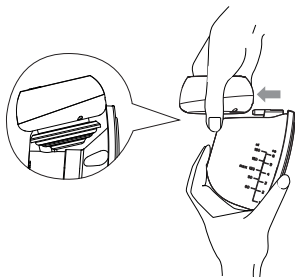


Immagine 1

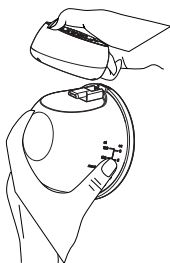


Immagine 2


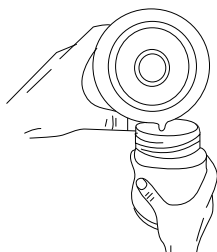



Immagine 3

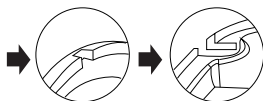

**FESSURA DELLA
COPPA RACCOGLILATTE**

Istruzioni per la regolazione della fibbia del reggiseno

Regolare la lunghezza delle spalline del reggiseno per rendere più confortevole l'aspirazione. Agganciare un'estremità della fibbia di regolazione del reggiseno alla fibbia interna del reggiseno per l'allattamento. La lunghezza del reggiseno può essere regolata agganciando la fibbia del reggiseno da allattamento all'altra estremità della fibbia di regolazione del reggiseno.

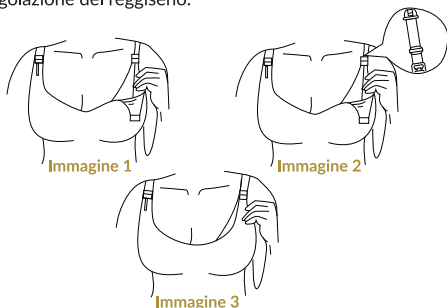

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Aspirazione debole o assente	1. Controllare se la valvola è installata correttamente. 2. Caricare il dispositivo prima dell'uso. 3. Controllare che il dispositivo sia posizionato correttamente, altrimenti il tiralatte non potrà aspirare.
Dolore al capezzolo	1. Massaggiare prima e selezionare un livello di aspirazione confortevole. 2. Consultare un consulente per l'allattamento.
Niente o poco latte estratto	1. Assicuratevi di essere in una posizione comoda. 2. Se l'estrazione dura da 5 a 10 minuti, fate una pausa e provate in un altro momento. 3. Assicurare un livello di aspirazione ottimale durante l'uso. 4. Rilassatevi e riprovate.

Istruzioni per il telecomando

Assicurarsi che il tiralatte sia posizionato correttamente all'interno del reggiseno per l'allattamento e ben collegato al seno. Puntare il ricevitore sopra l'host e premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per avviare il tiralatte; cambiare liberamente la modalità seguendo l'icona sul telecomando per aumentare o diminuire il livello di lavoro. Dopo l'uso, premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per spegnere il dispositivo.

Osservazioni:

Il telecomando è uno strumento di controllo aggiuntivo. Se viene danneggiato o smarrito, il tiralatte può comunque essere azionato con i pulsanti sul motore del tiralatte.



Grazie per aver scelto i prodotti InnoGIO!

Per utilizzare al meglio il prodotto,
leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo
in caso di domande future.

Le immagini utilizzate nel manuale sono solo di riferimento.
In caso di discrepanze tra le immagini e il prodotto,
si prega di attenersi al prodotto reale.

innoGIO

Importatore: **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka 74H
03-289 Varsavia, Polonia
www.innogio.it

 @innogio.official  @innogio_com

